



FUNKTIONSBESCHRIEB

Version 1.2 – Juni 2017

[1] Element hinzufügen

Mit dem Knopf «Hinzufügen» können weitere drahtgebundene oder drahtlose Elemente hinzugefügt werden. Nach dem Klick auf diesen Knopf gelangen Sie direkt in die Elemente-Bearbeitung, dort können Sie die Attribute anpassen und dieses eröffnen. Anschliessend befindet sich das Element auf der Elemente-Übersicht.

[2] Funkelemente exportieren

Mit dem Pfeil nach unten können Sie sämtliche drahtgebundene oder drahtlose Elemente im Excel-Format (.xlsx) exportieren.

[3] Benutzerdefinierte Suche

Mit dem Suchlupen-Symbol können drahtgebundene oder drahtlose Elemente durchsucht werden. Nach dem Klick auf das Zeichen erscheint ein Suchfeld für die Eingabe der Suchanfrage. Anschliessend werden sämtliche Attribute der Elemente mit dem Suchwert verglichen und angezeigt.

[4] Vordefinierte Filter

Mit den vordefinierten Filtern können Elemente abhängig von ihrem Status ein- oder ausgeblendet werden.

[5] GETS-ID Die GETS-ID zeigt die programmierte Adresse des Elements im GETS-System.

[6] Code Der Code zeigt die vierstellige Bezeichnung des Elements im GETS-System.

[7] Name Zeigt die elfstellige Bezeichnung, welcher für dieses Funkelement

im GETS-System hinterlegt wurde. Die Bezeichnung wird bei verschiedenen Events (Ruf, Anwesenheit) auf den Mobilengeräten (DECT) und im VisiCall angezeigt.

[8] Notiz Zeigt Notizen, welche für dieses Funkelement in der Verwaltungsoberfläche hinterlegt wurden. Notizen haben keinen Einfluss auf das Gets-System und dienen rein der Organisation.

[9] Profil Zeigt das Profil, welches für dieses Funkelement aktiv ist.

[10] Sektion Zeigt die Sektion, welche dem Element zugewiesen wurde.

[11] Position Zeigt die letzte Position des Funkelements, die im GETS-System registriert wurde.

[12] Batterie Zeigt den momentanen Stand der Batterie des jeweiligen Funkelements.

[13] Status Zeigt den den Status des jeweiligen Elements - also, ob das Element aktiv, inaktiv oder defekt ist.

[14] Element bearbeiten
Indem Sie auf einen Text klicken, gelangen Sie in die Bearbeitungsansicht.

[15] Bulk-Änderungen
Mit einem Klick auf ein Element, ohne auf einen Text zu drücken, können Sie ein oder mehrere Elemente auswählen und Bulk-Änderungen durchführen.

Befehle wurden komplett abgearbeitet.

- CARECALL
 - ☑ Elemente
 - Profile
 - Berichte

CARELOG

VISICALL



Elemente

CareCall > Elemente

[2] [Hinzufügen +] [1]

Alle 180 Aktiv 120 Inaktiv 55 Defekt 5 [4]

	GETS-ID [5]	Code [6]	Name [7]	Notiz [8]	Profil [9]	Sektion [10]	Position [11]	Batterie [12]	Status [13]
	001	MED1	Martin C.	Eine kleine Notiz für diese...	Sommer	Flügel Ost	WC		✓
[14]	002	MED2	Tobias K.	Dieser Träger ist etwas...	Sommer	Flügel West	Gang		✓
	003	MED3	Patrick D.	Eine kleine Notiz für diese...	Ausflug	Demenzabteilung	Garten		⚠
	004	MED4	Monika F.	Dieser Träger ist etwas...	Ausflug	Flügel West	Garten		✂
	101	BOD1	Irené W.	Eine kleine Notiz für diese...	Dement I	Flügel West	WC		✓
[15]	102	BOD2	Peter P.	Dieser Träger ist etwas...	Dement II	Flügel Ost	Gang		✓
	151	TUR1	Alfonso P.	Eine kleine Notiz für diese...	Dement I	Demenzabteilung	Aufenthalt		✓
	152	TUR2	Ruth L.	Dieser Träger ist etwas...	Dement II	Flügel Ost	Aufenthalt		✂

[1] Änderungen speichern

Mit dem Knopf «Speichern» werden die Änderungen am Element gespeichert.

[2] Änderungen abbrechen

Mit dem Knopf «Abbrechen» werden die getätigten Änderungen nicht gespeichert und Sie gelangen zurück auf die Elemente-Übersicht.

[3] Element löschen

Mit dem Pfeil nach unten können Sie das ausgewählte Element direkt löschen.

[4] Code Mit diesem Textfeld kann der vierstellige Code geändert werden, welcher für dieses Element im Gets-System hinterlegt wurde.

[5] Bezeichnung Mit diesem Textfeld kann die elfstellige Bezeichnung geändert werden, welche für dieses Element im Gets-System hinterlegt wurde.

[6] Profil Mit diesem Auswahlfeld kann ein Funkelement einem Profil zugewiesen werden. Ein Profil ist eine Vorlage für eine Bewegungszone. Wurde kein Profil definiert, muss die Bewegungszone individuell festgelegt werden.

[7] Sektion Mit diesem Auswahlfeld kann das Element einer Sektion zugewiesen werden.

[8] Notiz Mit diesem Textfeld können Notizen für das Element hinterlegt werden.

[9] Status Mit diesem Auswahlfeld kann der Status des Elements als aktiv, inaktiv oder defekt definiert werden.

[10] Verknüpfen Mit dem Verknüpfen-Symbol können mehrere Elemente die gleiche Bezeichnung teilen. Nach dem Klick auf das Zeichen erscheint eine Auswahl der bestehenden Bezeichnungen, mit denen das Element verknüpft werden kann.

[11] Technische Daten Dieser Informationsbereich zeigt die technischen Elementdaten. Die Daten können nur von Benutzer mit der entsprechenden Berechtigung angepasst werden.

[12] Andocken an Mit diesem Auswahlfeld kann ein Funkelement ausgewählt werden (Master), an dem das Funkelement andockt werden kann, welches gerade bearbeitet wird. Ist ein Funkelement an ein anderes andockt, kann nur noch das Master-Element bearbeitet werden.

Das Master-Element ist ein Elementtyp, sondern die Bezeichnung eines normalen Elements, an dem andere Elemente andockt sind. Master-Element, lassen sich an kein weiteres Element andocken. Durch das Andocken über nimmt das andockte Element die Einstellungen des Master-Elements.

Andockung loslösen Mit dem Knopf «loslösen», welcher an Stelle des Speichern-Kopf bei einem andockten Element erscheint, wird das Element vom Master-Element losgelöst. Wird ein Element losgelöst, wird die Konfiguration vor der Andockung wieder hergestellt.

Befehle wurden komplett abgearbeitet.

CARECALL

- Elemente
- Profile
- Berichte

CARELOG

VISICALL



Elemente

CareCall > Elemente > Bearbeiten

[3] [2] [1] Abbrechen Speichern

Basisdaten

Profil

Statistik

Protokoll

[4] Code MED1 [9] Status Aktiv [5] Name Medaillon 1 [10] [6] Profil Sommer [7] Sektion Intensivpflege West [8] Notiz

Technische Daten

Elementart Funkelement	GETS-ID 001
MAC-Adresse 26-55-89-93	Auslöseelement Medaillon
Aktivitätskontrolle ist inaktiv	

Andocken an

-- Nicht andockt [12]

[1] Bewegungszonen definieren

Die einzelnen Symbole auf den Ansichten sind entweder grün oder rot. Ein grünes Symbol bedeutet, dass ein Funkelement diesen Durchgang überschreiten darf. Ein rotes Symbol bedeutet, dass dieser Durchgang für das Funkelement gesperrt ist und einen Ruf auslöst, sobald das Funkelement die Zone überschreitet.

[2] Profil

Mit diesem Auswahlfeld kann ein Funkelement einem Profil zugewiesen werden. Ein Profil ist eine Vorlage für eine Bewegungszone. Wurde kein Profil definiert, muss die Bewegungszone individuell festgelegt werden.

[3] Temporäre Profilumstellung

Mit dem Auswahlfeld und der Datum-Zeit-Auswahl kann eine temporäre Profilumstellung konfiguriert werden. Eine temporäre Profilumstellung übersteuert die aktuelle Bewegungszone, welche entweder durch eine individuelle Auswahl oder ein Hauptprofil definiert wurde.

Beispielsweise kann die Pflege die Bewegungszone eines Medaillonträgers für die nächsten Stunden auf das Profil «Alles frei» ändern, währendem diese Person einen Spaziergang mit den Angehörigen unternimmt. Nach der eingestellten Zeit wechselt die Bewegungszone automatisch wieder zur ursprünglichen Konfiguration zurück.

[4] Checkpoints auf dieser Karte

Auf dieser Liste sind alternativ zur Karte [14] die einzelnen Checkpoints mit aktueller Konfiguration (offen/verboten) ersichtlich. Mit einem Klick auf den entsprechenden Eintrag kann die Konfiguration auch in dieser Ansicht angepasst werden. Element die Einstellungen des Master-Elements.

Befehle wurden komplett abgearbeitet.

CARECALL

• Elemente

• Profile

• Berichte

CARELOG

VISICALL



Elemente

CareCall > Elemente > Bearbeiten

Abbrechen

Speichern



Basisdaten Profil Statistik Protokoll

Profil

Hauptprofil

Sommer


Temporäres Profil

Alles frei

Aktiviere Profil bis

Profil temporär umstellen

Checkpoints auf dieser Karte		
	Code	Name
	0001	Lift
	0002	Haupteingang
	0003	Garten
	0004	Aufenthaltsraum

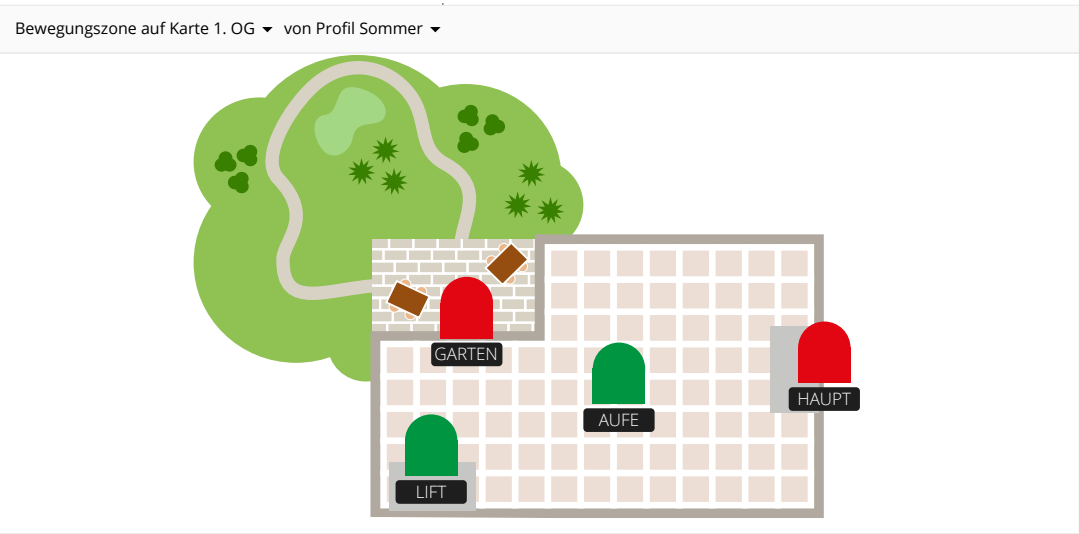

[1] Änderungen an diesem Element

Auf dieser Liste sind die letzten Manipulationen an diesem Element ersichtlich.

[2] Letzte Positionen

Auf dieser Liste sind die letzten erfassten Positionen des Element ersichtlich.

[3] Statistiken

Unter dem Reiter Statistik werden wichtige Kennzahlen für das ausgewählte Element angezeigt.

Batterieverlauf Zeigt den Akkustand des Elements auf einer Zeitachse. Mit dieser Grafik kann der Akkuverbrauch überprüft werden.

Rufe pro Tag Zeigt die Anzahl Rufe des Elements auf einer Zeitachse. Mit dieser Grafik ist der Aktivitätsverlauf des Elements ersichtlich.

Positionen Zeigt die Anzahl Positionsänderungen auf der Zeitachse.

Befehle wurden komplett abgearbeitet.

CARECALL

- Elemente
- Profile
- Berichte

CARELOG

VISICALL



Elemente

CareCall > Elemente > Bearbeiten

Abbrechen

Speichern



[3]

- Basisdaten
- Profil
- Statistik
- Protokoll**

[1]

Änderungen an diesen Element		
Zeitpunkt	Benutzer	Änderung
29.03.2017 14:48	Technischer Dienst	An das Medaillon 2 angedockt
29.03.2017 14:24	Pflege Station 1	Türrechte geändert
29.03.2017 14:28	Technischer Dienst	Code geändert
29.03.2017 14:11	Technischer Dienst	Vom Medaillon 3 losgelöst

[2]

Letzte Positionen	
Zeitpunkt	Position
29.03.2017 14:44	Garten
29.03.2017 14:28	Haupteingang
29.03.2017 13:55	Aufenthalt
29.03.2017 13:01	3. Obergeschoss

[1] Änderungen speichern

Mit dem Knopf «Speichern» werden die Änderungen am Bericht und den dazugehörigen Regeln gespeichert.

[2] Änderungen abbrechen

Mit dem Knopf «Abbrechen» werden die getätigten Änderungen nicht gespeichert und Sie gelangen zurück auf die Bericht-Übersicht.

[3] Element löschen

Mit dem Pfeil nach unten können Sie den ausgewählten Bericht direkt löschen.

[4] Aktiv/Inaktiv

Mit dem Schalter kann definiert werden, ob der Bericht aktiv oder inaktiv ist. Ist der Schalter auf inaktiv, wird der Bericht und die dazugehörige Benachrichtigung nicht ausgeführt.

[5] Name

Mit diesem Textfeld kann dem Bericht ein Name vergeben werden. Der Name dient in der Übersicht als Bezeichnung für den jeweiligen Bericht und hat vorallem eine organisatorische Funktion.

[6] Datenversand

Mit dieser Checkbox kann definiert werden, ob im definierten Intervall [7] in jedem Fall eine Benachrichtigung gesendet wird oder nur wenn Daten vorhanden sind. Ist die Checkbox also angewählt, werden die Benachrichtigungen nur dann versendet, wenn das System mindestens ein Eintrag gefunden hat, welcher auf die definierten Filter [11] zutrifft.

[7] Intervall

Mit dem Auswahlfeld kann der Intervall bestimmt werden, indem der Bericht vom System erstellt wird. So kann der Bericht entweder täglich, wöchentlich oder monatlich versendet werden. Eine weitere Option ist der Intervall «sofort», damit wir der Bericht versendet, sobald neue Daten für die definierten Filter [11] gefunden wurden.

[8] Termin der Ausführung

Mit diesen Auswahlfeldern kann definiert werden, wann der Bericht genau versendet werden soll. Je nach Auswahl des Intervalls, werden hier unterschiedliche Auswahl-Optionen angezeigt.

[9] Jetzt ausführen

Mit dem Knopf «Jetzt ausführen» wird die definierte Filter-Suche [11] sofort ausgeführt und die zutreffenden Einträge an die Empfänger gesendet.

[10] Benachrichtigungsziele

Mit den Schaltern wird definiert, an welche Ziele der Bericht versendet wird.

[11] Filter-Regel

Mit diesen Auswahlfeldern können Filter für diesen Bericht definiert werden. Der aktuelle Datenbestand wird mit den definierten Regeln gefiltert und die Resultate im definierten Intervall [7] an die Benachrichtigungsziele [10] gesendet.

[13] Filter hinzufügen

Mit dem Knopf «Regel hinzufügen» wird die definierte Auswahl [11] gespeichert. Ein Bericht kann aus mehreren Filtern bestehen und wird nur ausgeführt, wenn mindestens ein Eintrag auf sämtliche Regeln zutrifft.

Befehle wurden komplett abgearbeitet.

CARECALL

- Elemente
- Profile
- Berichte

CARELOG

VISICALL

Berichte

CareCall > Berichte > Bearbeiten

[3] ⌵ [2] Abbrechen [1] Speichern ✓

Basisdaten

[4] ☒ Ist aktiv

[5] Name
Niedrige Batteriestände

[6] ☒ Nur versenden wenn Daten vorhanden sind.

Zeitplan

[7] Intervall
Wöchentlich

[8] Ausführungstag
Freitag

Ausführungszeit
16:00

[9] Jetzt ausführen ⚙

Benachrichtigungsziele				
☐	☒	Technischer Dienst	td@caresuite.ch	Email
☐	☒	Pflegedienstleitung	pflege@caresuite.ch	Email
☐	☒	Geschäftsleitung	leitung@caresuite.ch	Email

Filter-Regeln

Attribut	Vergleich	Wert	
Batterie	Kleiner als (<)	8	🗑
Regel hinzufügen +			

[10]

[11]

[12]

[1] Suche starten
Mit dem Knopf «Suche starten» wird die Suche mit den ausgewählten Suchfiltern gestartet.

[2] Standard-Filter
Mit dem Knopf «Filter» kann die ausgewählte Suchmaske als Standard-Filter gespeichert werden. Ebenfalls können hier bestehende Standard-Suchfilter erneut geladen oder gelöscht werden.

Suchfilter
Um die gewünschten Daten zu erhalten, können verschiedene Filter ausgewählt werden. Die folgenden Felder dienen dazu, das angezeigte Resultat einzugrenzen.

[4] Freitext
Mit diesem Freitextfeld können die geloggtten Einträge frei durchsucht werden. Dabei werden die Einträge mit dem eingetragenen Wert verglichen und bei einer Übereinstimmung angezeigt.

[5] Zeitraum
Mit dieser Auswahl von Zeit und Datum wird definiert, innerhalb welches Zeitraums die Daten ausgewertet werden sollen.

[6] Rufart
Definiert die Art der gesuchten Rufereignisse.
Beispiel: Anwesenheit, Normalruf, Notruf

[7] Wochentag
Definiert die Wochentage, welche für die Suche berücksichtigt werden sollen.
Beispiel: Montag, Dienstag – Für die Suche werden nur Ereignisse berücksichtigt, welche am Montag oder Dienstag stattfanden.

[8] Beschreibung
Definiert die Beschreibung der Ereignisse, welche für die Suche berücksichtigt werden.
Beispiel: Bad, WC, Zimmer, Schwesternzimmer

[9] Code
Definiert die Codes der gesuchten Rufereignisse.
Beispiel: 101, 102, 103, 104, 201, 202, 204, 206

[10] Sektion
Definiert die Sektionen, welche für die Suche berücksichtigt werden.

[11] Position
Definiert die Positionen der Ereignisse, welche für die Suche berücksichtigt werden.

[12] Attribut
Definiert die Attribute für die Bettenerkennung der Ereignisse, welche für die Suche berücksichtigt werden.
Beispiel: 0---, 1---, 2---, 3---, T---, F---

[13] Uhrzeit
Definiert den Zeitraum der Ereignisse, welche für die Suche berücksichtigt werden.
Beispiel: 08:00 bis 09:00 Uhr – Für die Suche werden nur Ereignisse angezeigt, welche zwischen 08:00 und 09:00 Uhr stattfanden.

[14] Min. Dauer
Definiert die Minstdauer der Ereignisse in Sekunden, welche für die Suche berücksichtigt werden.

[15] Filter zurücksetzen
Die aktuelle Suche wird verworfen und kann neu gestartet werden.

Befehle wurden komplett abgearbeitet.

CARECALL

CARELOG

Suche

Berichte

VISICALL

CareLog
455 Treffer

[4] 🔍 Geben Sie hier Ihren Suchbegriff ein.

Rufart

☐ Anwesenheit

☒ Normalruf

☐ Notruf

☐ Flucht

☐ Hotelruf

545

455

56

232

2

Wochentage

☐ Montag

☒ Dienstag

☒ Mittwoch

☐ Donnerstag

☐ Freitag

☐ Samstag

☐ Sonntag

225

353

68

555

8

450

6

Status

☐ Offene Rufe

10

Beschreibung

Code

MED 1 MED 2

Sektion

Sektion OST Sektion WEST

Position

01.01.2017 00:00 - 31.12.2017 23:59

Attribut

Uhrzeit von

12:00

Uhrzeit bis

18:00

Minstdauer (in Min.)

8

Filter zurücksetzen

Adresse	Code	Bezeichnung	Attribut	Sektion	Rufart	Dauer	Startzeit	Endzeit
001	MED1	Martin C.	---	Sektion OST	Normalruf	03:00	19.08.2016 / 12:45:11	19.08.2016 / 12:48:11
002	MED2	Tobias K.	---	Sektion WEST	Normalruf	04:16	19.08.2016 / 12:34:32	19.08.2016 / 12:38:48
003	MED1	Patrick D.	---	Sektion SÜD	Normalruf	01:04	19.08.2016 / 12:21:04	19.08.2016 / 12:22:08
002	MED2	Tobias K.	---	Sektion WEST	Normalruf	05:06	19.08.2016 / 12:16:47	19.08.2016 / 12:21:53
088	MED1	Maria D.	---	Sektion WEST	Normalruf	03:00	19.08.2016 / 12:12:12	19.08.2016 / 12:15:12
233	MED2	Ingrit P.	---	Sektion OST	Normalruf	05:22	19.08.2016 / 12:07:17	19.08.2016 / 12:12:39
210	MED1	Patrizia O.	---	Sektion OST	Normalruf	00:32	19.08.2016 / 12:05:25	19.08.2016 / 12:05:57

[1] Änderungen speichern

Mit dem Knopf «Speichern» werden die Änderungen am Bericht und den dazugehörigen Regeln gespeichert.

[2] Änderungen abbrechen

Mit dem Knopf «Abbrechen» werden die getätigten Änderungen nicht gespeichert und Sie gelangen zurück auf die Bericht-Übersicht.

[3] Element löschen

Mit dem Pfeil nach unten können Sie den ausgewählten Bericht direkt löschen.

[4] Aktiv/Inaktiv

Mit dem Schalter kann definiert werden, ob der Bericht aktiv oder inaktiv ist. Ist der Schalter auf inaktiv, wird der Bericht und die dazugehörige Benachrichtigung nicht ausgeführt.

[5] Name

Mit diesem Textfeld kann dem Bericht ein Name vergeben werden. Der Name dient in der Übersicht als Bezeichnung für den jeweiligen Bericht und hat vorallem eine organisatorische Funktion.

[6] Datenversand

Mit dieser Checkbox kann definiert werden, ob im definierten Intervall [7] in jedem Fall eine Benachrichtigung gesendet wird oder nur wenn Daten vorhanden sind. Ist die Checkbox also angewählt, werden die Benachrichtigungen nur dann versendet, wenn das System mindestens ein Eintrag gefunden hat, welcher auf die definierten Filter [11] zutrifft.

[7] Intervall

Mit dem Auswahlfeld kann der Intervall bestimmt werden, indem der Bericht vom System erstellt wird. So kann der Bericht entweder täglich, wöchentlich oder monatlich versendet werden. Eine weitere Option ist der Intervall «sofort», damit wir der Bericht versendet, sobald neue Daten für die definierten Filter [11] gefunden wurden.

[8] Termin der Ausführung

Mit diesen Auswahlfeldern kann definiert werden, wann der Bericht genau versendet werden soll. Je nach Auswahl des Intervalls, werden hier unterschiedliche Auswahl-Optionen angezeigt.

[9] Jetzt ausführen

Mit dem Knopf «Jetzt ausführen» wird die definierte Filter-Suche [11] sofort ausgeführt und die zutreffenden Einträge an die Empfänger gesendet.

[10] Benachrichtigungsziele

Mit den Schaltern wird definiert, an welche Ziele der Bericht versendet wird.

[11] Filter-Regel

Mit diesen Auswahlfeld kann ein erstellter CareLog-Filter ausgewählt werden. Der aktuelle Datenbestand wird mit den definierten Regeln gefiltert und die Resultate im definierten Intervall [7] an die Benachrichtigungsziele [10] gesendet.

Befehle wurden komplett abgearbeitet.

CARECALL

CARELOG

Suche

Berichte

VISICALL



Berichte

CareLog > Berichte > Bearbeiten

[3]

Abbrechen

Speichern

[1]

Basisdaten

[4]

Ist aktiv

[5]

Name

Niedrige Batteriestände

[6]

Nur versenden wenn Daten vorhanden sind.

Zeitplan

[7]

Intervall

Wöchentlich

[8]

Ausführungstag

Freitag

Ausführungszeit

16:00

[9]

Jetzt ausführen

Benachrichtigungsziele

	Technischer Dienst	td@caresuite.ch	Email
	Pflegedienstleitung	pflege@caresuite.ch	Email
	Geschäftsleitung	leitung@caresuite.ch	Email

Filter-Regeln

Versende die Ergebnisse aus folgendem CareLog-Filter

Notrufe, länger als 10 Minuten

Display

In dieser Übersicht kann die jeweilige Anzeige direkt konfiguriert werden. Die getätigten Einstellungen betreffen dabei nur den Bildschirm, auf dem die CareSuite gerade bedient wird.

Sind die Einstellungen abgeschlossen, verschwindet der Balken links und die Anzeige oben nach einigen Sekunden.

[1] Gruppe

Mit dieser Auswahl kann die Anzeige an einer Anzeigegruppe zugewiesen werden. Die Anzeige übernimmt die anzuzeigenden Informationen (Rufe und Anwesenheiten aus bestimmten Sektionen) und das Verhalten (Zeitschaltungen) von den übergeordneten Gruppeneinstellungen.

[2] Layout

Mit dieser Auswahl kann definiert werden, wie die Rufe und Anwesenheiten auf der Anzeige dargestellt werden sollen. Die Anzeige lässt sich mit folgenden Layouts definieren.

Halbiert	Auf der oberen Bildschirmhälfte werden die Rufe angezeigt und auf der unteren Bildschirmhälfte die Anwesenheiten.
Drittel Rechts	In den ersten beiden Dritteln von rechts werden die Rufe angezeigt und auf dem letzten Drittel die Anwesenheiten.
Nur ein Ruftyp	Auf der kompletten Anzeige werden nur die Rufe angezeigt. Die Anwesenheiten sind nicht sichtbar.

[3] Seiten vertauschen

Mit dieser Checkbox werden die Informationen auf der Anzeige gespiegelt angezeigt. Somit werden die Anwesenheiten anstelle der Rufe angezeigt und die Rufe anstelle der Anwesenheiten. Dies hat folgende Einflüsse auf die Layouts:

Halbiert	Auf der oberen Bildschirmhälfte werden die Anwesenheiten angezeigt und auf der unteren Bildschirmhälfte die Rufe.
Drittel Rechts	In den ersten beiden Dritteln von rechts werden die Anwesenheiten angezeigt und auf dem letzten Drittel die Rufe.
Nur ein Ruftyp	Auf der kompletten Anzeige werden nur die Anwesenheiten angezeigt. Die Rufe sind nicht sichtbar.



Befehle wurden komplett abgearbeitet.



CARECALL



CARELOG



VISICALL



Display



Einstellungen



Gruppen

BILDSCHIRM-EINSTELLUNGEN

Gruppe

Bildschirme Sektion 1



Layout

Halbiert



Seiten vertauschen



1 Minute

WC

216

2. OG

2 Minuten

Funkelement-Ruf

Frau Meier

Demenz 1, Garten

5 Minuten

10 Minuten

2 Minuten

Anwesenheit

249

2. OG

14 Minuten

Anwesenheit

253

2. OG - Ost

25 Minuten

[1]

[2]

[3]

33 Minuten

[1] Firmenlogo

Mit dem Upload-Feld kann eine Logo-Datei als PNG oder JPEG hochgeladen werden. Das Logo wird anschliessend auf der Anzeige platziert. Währendessen Ereignisse (Rufe, Anwesenheiten) angezeigt werden, erscheint das Logo auf der Anzeige in der linken Ecke unten. Sind keine Ereignisse vorhanden, erscheint das Logo oberhalb der Uhrzeit.

[2] Eskalationsverhalten

Mit dem Schalter kann das Eskalationsverhalten aktiviert werden. Ist das Eskalationsverhalten definiert, eskalieren Rufe, nachdem diese das definierte Alter erreicht haben. Bei einer Eskalation wird ein Ereignis gleich wie ein Notruf auf dem VisiCall dargestellt.

Info-Meldungen

Neben den Ereignissen aus dem Gets-System können zusätzlich noch benutzerdefinierte und zeitlich gesteuerte Info-Meldungen auf den Anzeigegegeräten visualisiert werden.

[3] Anzuzeigender Text

Mit diesem Textfeld kann die gewünschte Info-Meldung erfasst werden.

[4] Anzeigen von...bis

Mit dieser Auswahl von Zeit und Datum wird definiert, innerhalb welches Zeitraums die Info-Meldung angezeigt werden soll. Wird kein Startdatum vergeben, wird die Meldung ab sofort bis zum Enddatum angezeigt. Wird kein Enddatum vergeben, wird die Meldung bis zur manuellen Löschung angezeigt.

[5] Zurücksetzen

Mit dem Knopf «Zurücksetzen» wird die aktuelle Info-Meldung manuell gelöscht und die Eingabefelder werden zurückgesetzt.

Befehle wurden komplett abgearbeitet.

CARECALL

CARELOG

VISICALL

- Display
- Einstellungen
- Gruppen



Einstellungen

VisiCall > Einstellungen

Firmenlogo

Logo-Datei (JPG/PNG)

File input field with 'Datei auswählen' button and 'Keine ausgewählt' text

Jetzt ausführen button with upload icon

Eskalationsverhalten

Eskalationsverhalten aktiviert toggle switch

Alter in Minuten bis Rufe eskalieren

15 input field

Eskalationsverhalten speichern button with warning icon

Info-Meldung

Anzuzeigender Text

Large text area for message content

Anzeigen von date picker

Anzeigen bis date picker

Zurücksetzen button with trash icon

Speichern button with checkmark icon

[3]

[4]

[5]

[1] Änderungen speichern

Mit dem Knopf «Speichern» werden die Änderungen an der Anzeigegruppe gespeichert.

[2] Änderungen abbrechen

Mit dem Knopf «Abbrechen» werden die getätigten Änderungen nicht gespeichert und Sie gelangen zurück auf die Gruppen-Übersicht.

[3] Gruppe löschen

Mit dem Pfeil nach unten können Sie die ausgewählte Gruppe direkt löschen.

[4] Name

Mit diesem Textfeld kann der Name der Anzeigegruppe geändert werden. Eine Anzeige ist eine Gruppe von VisiCall-Anzeigen, welche das gleiche Verhalten aufweisen.

[5] Sektionen

Mit den Schaltern können die Sektionen definiert werden, dessen Ereignisse auf den Anzeigen in dieser Gruppe visualisiert werden sollen.

[6] Zeitschaltungen

Zeitumschaltungen sind regelmässige und zeitlich begrenzte Änderungen der Sektionen, deren Ereignisse in dieser Anzeigegruppe visualisiert werden sollen. Beispielsweise können so Sektionen in der Nacht oder an einzelnen Wochentagen zusammengeschaltet werden.

Dazu muss für jede Zeitumschaltung ein Starttag/Startzeit und ein Endtag/Endzeit definiert werden. Die Umschaltung wird dann automatisch jede Woche wiederholt.

[7] Sektionen-Filter

Mit den Schaltern können die Sektionen definiert werden, deren Ereignisse während der Zeitschaltung auf den Anzeigen in dieser Gruppe visualisiert werden.

[8] Zeitschaltung hinzufügen

Mit dem Knopf «Zeitschaltung hinzufügen» kann die Zeitschaltung erstellt werden. Für eine Anzeigegruppe können mehrere Zeitschaltungen definiert werden.

Befehle wurden komplett abgearbeitet.

CARECALL

CARELOG

VISICALL

- Display
- Einstellungen
- Gruppen



Gruppen

VisiCall > Gruppen > Bearbeiten

[3]

Abbrechen

Speichern

[1]

[4]

Basisdaten

Name

Bildschirme der Sektion OST und WEST

[5]

Sektionen-Filter

Sektion OST

Sektion WEST

Sektion NORD

Sektion SÜD

Zeitschaltungen

Starttag

Freitag

Startzeit

00:00

Endtag

Sonntag

Endzeit

23:59

Sektionen-Filter

Sektion OST

Sektion WEST

Sektion SÜD

Sektion NORD

Zeitschaltung hinzufügen

[8]

[7]



CARESUITE 4

FUNKTIONSBESCHRIEB

Version 1.2

30. Juni 2017